## ⑩日本菌特許庁(JP)

#### ① 特許出願公表

# ®公表特許公報(A)

 $\Psi 3 - 503317$ 

個公表 平成3年(1991)7月25日

@Int. Cl. 5 G 01 N 27/62

H 01 J

毎発明の名称

識別配号 X

庁内整理番号

審 杏 讃 求 未請求 予備審査請求 未請求

部門(区分) 6(1)

(全 7 頁)

30/72

49/26

凍結溶液からの脱着による質量分析用試料の調製方法

頭 平2-503086

66公出 顾 平2(1990)1月12日 ❷翻訳文提出日 平2(1990)9月13日

**⊗国際出願 PCT/US90/00229** 

**匈国際公開番号 WO90/08398** ❸園際公開日 平2(1990)7月26日

601989年1月17日50米国(US)30298,649 優先権主張

14

ベツカー, クリストフアー・エ

アメリカ合衆国カリフオルニア州 94025 メンロ・パーク、クロ

ーパー・レーン 106

勿出 願 人 エス・アール・アイ・インター

ナショナル

アメリカ合衆国カリフオルニア州 94025 - 3493、メンロ・パー

ク、レイヴンズウッド・アヴェニウ 333 .

10代 理 人

個発 明 者

弁理士 川原田 一穂

创指 定 国

AT(広域特許), BE(広域特許), CA, CH(広域特許), DE(広域特許), DK(広域特許), ES(広域特 許),FR(広域特許),GB(広域特許),IT(広域特許),JP,LU(広域特許),NL(広域特許),SE(広域 特許)

# 請求の範囲

- 1. 次記の各工程を含むことを特徴とする質量分析用不揮発性 分子試料の調製に有用な方法;
  - (a)溶液を形成するように溶媒中に熔解させて、分析すべ きし以上の型の分子を含む溶液を与える工程、
  - (b) 溶解した分子の该溶液を、 凍結溶液を形成するように 凍結する工程、および
  - (c)協凍結溶液を、分析すべき分子を結凍結溶液の要固か ら脱者させるエネルギー源に暴露する工程。
- 2. 分析すべき 1以上の分子を溶解して含む腹溶液を与える核 工程が、さらに、少なくとも約 500amu の質量を有する1以上 の型の分子を溶解した溶液を与えることを含むことを特徴とす る請求の範囲第1項記載の方法。
- 3. さらに、脱者した分子を質量分析領域に選ぶ工程を含むこ とを特徴とする請求の範囲第2項記載の方法。
- 4. 分析すべきは1以上の分子を含む溶液を与える度工程が、 さらに、故分子を、故大きな分子を脱着するのに使用するエネ ルギーを強力に吸収する溶媒に溶解させる工程を含み、譲溶媒 が、終分子の、旅源結溶視の表面からの脱着を、譲エネルギー の凍結溶液の表面より下での実質的吸収がなく、 そのため溶液 全体の加熱を阻止するように許容する もの であることを特徴と する請求の範囲第2項記載の方法。
- 5. 分析すべき抜分子を格謀に溶解させる鉄工程が、該分子の 低分子量溶媒中への溶解を含むもの で あることを特徴とする蹟 求の範囲第4項記載の方法。
- 6. 分析すべき数分子を低分子量溶媒に溶解させる数工程が、 さらにな分子の約 100ams より小さい 嬢子 量を有する溶媒分子

- より本質的になる溶媒中への溶解を含むものであることを特徴 とする精求の範囲第5項記載の方法。
- 7、分析すべき旅分子を低分子量溶媒に溶解させる線工程が、 さらに該分子を、水、1 - 5 炭素原子の有難熔煤およびその滋 合物よりなる群から選ばれた溶媒への溶解を含むものであるこ とを特徴とする請求の範囲第5項記載の方法。
- 8. 溶解した分子の臨溶液を凍結させる酸工程が、さらに、1 0-\*トルを越えない蒸気圧を有する凍結熔液を形成させること を合むものであることを特徴とする諸求の範囲第2項記載の方 抾.
- 9. さらに、分析すべき終分子の該凍結溶液を真空室に運び、 族連結溶液を、該分子を該連結溶液の表面から脱着させる間、 10-\*トルを越えない圧力に維持する工程を含むことを特徴と する鯖求の範囲第2項記載の方法。
- 1.0.分析すべき設分子の該凍結溶液を、該分子を脱着させる エネルギー源に暴露する設工程が、該連結溶液を、レーザ放射 に暴露するものであることを特徴とする請求の範囲第2項記載
- 11.分析すべき該分子の該連結溶被を、該分子を履着させる エネルギー源に暴露する故工程が、故凄結溶液を、イオン・ピ ーム・ボンバードメントに暴露するものであることを特徴とす る舘求の範囲第2項記載の方法。
- 1.2.分析すべき該分子の該凍結溶液を、該分子を脱着させる エネルギー源に暴露する袋工程が、路復結溶液を、電子ピーム ・ボンパードメントに暴露するものであることを特徴とする譲 求の顧開第2項記載の方法。
- 13. 分析すべき該分子の核連結溶液を、該分子を脱着させる

#### 特表平3-503317(2)

- エネルギー源に暴露する該工程が、旅渡結溶液を、高速原子ビーム・ポンパードメントに暴露するものであることを特徴とする請求の範囲第2項記載の方法。
- 14. 故凍結溶液を、該分子を脱着させるエネルギー液に暴露する該工程が、さらに該脱者した分子を、イオン化エネルギー液に暴露して、該脱者した分子を、該イオン化分子の質量分析の準備のためイオン化させる工程を含むことを特徴とする請求の範囲第2項記載の方法。
- 15. 次記工程を含むことを特徴とする、質量分析のための、 大きな分子の処理に有用な方法:
  - (a)少なくとも約 500amu の分子量を有する1以上の分析 すべき分子を、続いて該分子を溶液から脱着させるのに使 用するエネルギーを強力に吸収することのできる低分子量 溶媒に溶解させた溶液を与える工程。
  - (b) 溶解分子の抜物液を、液結溶液を形成するように液結させる工程、
  - (c) 弦凍結熔液を、10・トルより小さい蒸気圧を与える のに充分低い温度で、真空室内に維持する工程、および
  - (d) 該真空室内で、該連結溶液を、該連結溶液の表面から 分析すべき分子を 1-100 分子層脱着させるのに充分なエ ネルギー源に暴露する工程。
- 16. 該連結溶液を、該分子を脱着させるエネルギー源に暴露 する該工程が、かような脱着分子のイオン化を結果しないもの であり、且つ該方法が、該脱着分子を、イオン化分子の質量分 折の準備のため該脱着分子をイオン化するイオン化エネルギー 源に暴露する工程をも含むものであることを特徴とする請求の 範囲第15項記載の方法

強度を有するイオン化額に暴露する工程を含むことを特徴とする時状の軽囲第20項記載の方法。

- 2 2. 腹連結溶液を、10 トルより小さい蒸気圧を与えるの に充分低い温度で、真空室内に維持する紡工程が、さらに、先 ず腹凍結溶液を鎮温度まで冷却し、次いで腹冷却した連結溶液 を放真空室内に導入する工程を含むことを特徴とする錦求の範 田第2 0 項配載の方法。
- 23. 陸康結将被を、10 トルより小さい 密気圧を与えるの に充分低い温度で、真空室内に維持する核工程が、さらに、先 ず核冷却した凍結溶液を放真空室内に導入し、次いで核凍結溶 液を接温度まで冷却する工程を含むことを特徴とする請求の範 開第20項配載の方法。

- 17. 接脱着分子をイオン化源に暴露して接脱着分子をイオン 化する終工程が、さらに接脱着分子を光イオン化源に暴露する 工程をも含むものであることを特徴とする請求の範囲第15項 記載の方法。
- 18. 該分子を設容させ、該股着分子をイオン化する該工程が 、継続的サイクルで遂行されることを特徴とする競求の範囲第 16 項記載の方法。
- 19. 該継続的股着およびイオン工程が、該股者エネルギー源 および該イオン化源を継続的にパルス駆動することにより遂行 されることを特徴とする請求の範囲第18項記載の方法。
- 20. 次記工程を含むことを特徴とする、質量分析のための、 大きな分子の処理に有用な方法;
  - (a) 少なくとも約 500mm の分子量を有する 1 以上の分析 ずべき分子を、低分子量溶媒に溶解させて溶液とし、資溶 液を与える工程、ここで協溶媒は、続いて設分子を臨溶液 から脱者させるのに使用するエネルギーを強力に吸収する ことのできるものである。
  - (b) 溶解分子の旅溶液を、凍結溶液を形成するように凍結 する工程、
  - (c) 該連結溶液を、10<sup>-1</sup>トルを越えない蒸気圧を与える のに充分低い温度で、真空室内に難待する工程、および
  - (d) 複真空室内で、該凍結溶液を、該凍結溶液の表面から 分析すべき分子を 1-100 分子層放着させるのに充分なレ ーザ放射、イオンビーム・ポンパードメント、電子ビーム ・ボンパードメントおよび高速原子ポンパードメントより なる群から選ばれたエネルギー版に暴露する工程。
- 21. さらに、該脱着分子を、該脱着分子のイオン化に充分な

#### 明細書

凍結溶液からの脱着による質量分析用試料の顕製方法 発明の背景

#### 1. 発明の分野

本発明は、質量分析用試料の調製方法に係る。 さらに特定的に含えば、本発明は、質量分析のための不揮発性または不安定な大きな分子の試料の調製方法を指向しており、 そこでは、 先ず大きな分子の溶液を凍結させ、 凍結した分子を脱着させ、 そして若し脱着分子が脱着手段によって既にイオン化していない場合には、イオン化分子の質量分析ゾーンへの導入に先立つて脱密分子をイオン化するものなのである。この方法は、 液体クロマトグラフィーと機械的にインタフェースすることが可能かつ容易である。

#### 2. 先行技術の記載

被体クロマトグラフィー技術と組合せられた分子の質量分析において、被体は、しばしば薬発し、薬気中の分子は、質量分析用機器への導入に先立つてイオン化され、あるいは、溶液を蒸発させて得られた分子は、質量分析用機器のための粒子あるいは光量子を脱着することによりイオン化される。しかしながら、分析用の大きな不揮発性または熱的に不安定な分子は料の引動のため慣用されている気化あるいは脱着技術は、溶媒和分子の制御不能な分裂あるいはクラスタリング(集合)を招くことがある。(不信観性)

マクラッファティーら (McLafferty et al) に与えられた米 国特許第 3.997.298 号は、液体クロマトグラフィー/質量分 析数置を開示しているが、それは、カラムから熔離した液出液

#### 特表平3-503317(3)

の部分(単/複数)を、充分な真空ポンピングによつて、化学 イオン化質量分析計のイオン化窒に直接導入するものである。

ブルーニーら (Brunea et al) に与えられた米国特許第(.2 59.572 号は、質量分析用イオン化試料の調製方法を関示しているが、それは、液体クロマトグラフィー・カラムからの協治液を、動いているベルトコンベヤ上に置き、物質を残して溶液を蒸発させ、次いでベルトを、質量分析計に付随しているイオン化室の真空雰囲気中まで動かす。そこで物質がイオン、電子あるいはレーザから来る光量子の形の高度に緩縮されたエネルギーに暴露される。特許複音は、関示された確々の具体例に共通の主要な概念は、コンベヤベルト上の試料の高度に集中されたエネルギーへの暴露を、常に非常に短い間隔、即ち飲分の一秒以内に限ることを要求しており、エネルギーの集中はよって試料分子間の結合が、分子の化学分解を生じることないようにしたと述べている。

スツーク(Stuke) の米国特許第 4,686,366 号は、パルス・・レーザピームが質量分析計内で分析されるべき分子をイオン化するレーザ質量分析計を開示している。レーザ・パルスの持統時間は、分析される分子の分裂を避けるため、数ピコ砂に限られている。

これらの特許は、いずれも分子の不所望な分裂を回避することを意図した方法を記述しているが、現実の実施にあたつてかような技術は部分的にしか成功していない、 つまり分析される特定の分子(単または複数)にもよるが、ある分子は制御不能に分裂、あるいはクラスタし、そしてかような方法は予例不能で、それゆえは観できないと考えられている。

ボンバードされ、質量分析用のイオンを直接生み出す。FIB 技術の主要な楷在的利点の一つは、表面への試料分子の連続的供給にある。しかしながら、表面への疑惑/傷折を避ける分子の型、表面における分裂分子の蓄積、溶媒分子からの干渉、ならびに結果として生じる混合試料中の相対量を定量する困難性が欠点として合まれる。

試料締終に関する他の質量分析的方法には、質量分析に先立

つ気化およびィオン化のため符液を直接スプレイする方法が含まれる。かようなスプレイ法の第一のもの、所謂サーモスプレイ技術は、ベスタル (M.L. Veatal) によりサイエンス (Science) Vol. 226。(1984),pp. 275-281 に掲載された「高性館液体クロマトグラフィー・質量分析」(Bigh-Performance Liquid Chromatography-Hass Spectorometry) と題する論文に記述され、そこで、キャピラリーに充分な熱を加えて、液体がキャピラリーを遭遇する際、液体の制御された部分的な気化が生じるようにした、運行粒子あるいは摘を伴う超音被ジェットの生成と定義されている。

スプレイ法の第二のもの、所謂エレクトロスプレイ法は、ワングら(Hong et al)によりジャーナル・オブ・フィジカル・ケミストリー(Journal of Physical Chemistry)Vol. 92(1988)、pp.546-550 に掲載された『ポリエチレン・グリコールのエレクトロスプレイ・イオン化におけるマルチブル・チャージング』("Hultiple Charging in Electorospray Ionization of Poly(ethylen glycols)" と題する論文に記述され、そこで、著者は、溶液を、接地電位のメタライズしたキャピラリー管に対し高い電圧に保たれた金属の注射針を通じてエレクトロスプレイ室に導入する方法であると述べている。針先端の高い電場

ベッカーら (Becker et al) の米国特許第 4.733.073号は、本発明者らによつてなされ本発明の譲受人に譲渡され、かつここに相互参照がなされているが、イオンピーム、電子ピームあるいはレーザピームのようなプローブ・ピームが、分析される表面に対して向けられ、物質の試料がその表面から取り除かれるようにした試料の質量分析方法および装置を開示している。次いで、非同調の高強度レーザピームのような電磁放射のピームが、その表面の上の空間領域に向けられ、その放射ピームの中で、取り除かれた表面試料の非共鳴的な光イオン化を生じさる。イオン化された試料は次いて、質量分析に供される。

過去約10年にわたつて、ブルーニーらの特許で述べられたような試料の粒子または光量子のボンバードを使用する大きな不揮発性または熱的に不安定な分子の質量分析を記述した文献の数多くの例が現れて来た。この開発を回顧した一論文は、ブッシュおよびクークス(K.L.Busch and R.G.Cooks)による「大きな壊れ易い不揮発性分子の質量分析』("Nass Spectorosetry of Large, Pragila Holscules")と題し、サイエンス(Science) Vol. 218, (1982),pp. 247-254に掲載されたものである。

この論文に記述された方法の一つは、高速原子ボンバードメント(FAB)と呼ばれる。このFAB 法は、ライネハート (R.L Rhinehart, Jr.) によりサイエンス(Science, Vol. 218, (1982),pp. 254-260) に掲載された「高速原子ボンバードメント質量分析』(\*Fast Atom Bombardment Mass Spectorometry\*) と題する論文で、より詳しく問題されている。FAB 法では、試料は低揮発性の、普通グリセロールである液体中の溶液とされる。この溶液は、次いでキロ電子ボルトのエネルギーの原子により

か、出現する液体の表面を育電し、それを荷電槽の微観なスプレイに分散させる。その液がキャピラリー管に向かつて進むと き、溶媒は、荷電した溶質を残して薬発し、溶質は次いでキャ ピラリー管を通じて質量分析計まで進む。 。

しかしながら、上記の場合の各々において、質量分析のための生体分子のような大きな不揮発性分子の調整は、分子を、分子のイオン化に先立ちあるいはイオン化中に気化させようと試みながらも、依然として大きな分子の非特徴的分裂またはクラスタリング、あるいは大きな分子のその他には特徴付けられない、または信頼出来ない単層の危険を招くものである。

#### 発明の概要

それゆえ、本発明の一目的は、分子の不所望な分裂の危険を 最小限にする手法での、1以上の空の大きな分子の質量分析用 試料の調製方法を提供することにある。

本発明のこの他の目的は、分子の非特定的な分裂、あるいは 分子の不明瞭で信頼不能な同定を招く危険を最小限にする手法 での、大きな分子の質量分析用純粋または混合試料の調製方法 を提供することにある。

本発明のさらに別の目的は、分析すべき大きな分子を物媒中に、あるいは既に存在している適当な溶液を使用して溶解し、統いて得られた溶液を凍結させ、次いで、脱着工程中の分子の崩壊の危険を最小限にしながら、凍結溶液の表面から大きな分子を脱着させることによる、後続のイオン化のために信頼し得る一様な手法での、1以上の型の大きな分子の質量分析用は料の調製方法を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、分析すべき大きな分子を将媒中 に袴解し、得られた袴板を約10-\*トルを超えない蒸気圧を与 える温度で収結させ、次いで、脱着工程中の分子の崩壊の危険 を展小限にしながら、凍結溶液の裏面から大きな分子をエネル ギー源を使用して脱着させることによる、1以上の大きな分子 の質量分析用試料の調製方法を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、分析すべき大きな分子を、この大きな分子を脱着させるのに使用するエネルギーを強力に吸収する溶練中に溶解し、得られた溶液を約10~ トルを越えない 蒸気圧を与える温度で凍結させ、次いで、脱着工程中の分子の脱壊の危険を扱小限にしながら、凍結溶液の裏面から大きな分子をレーザ放射、電子ビーム・ボンバードメント、イオンビーム・ボンバードメントあるいは高速原子ビーム・ボンバードメントのようなエネルギー源を使用して脱着させることによる、1以上の大きな分子の質量分析用試料の調製方法を提供することにある。

本発明のさらに別の目的は、分析すべき大きな分子を、この 大きな分子を脱着させるのに使用するエネルギーを強力に吸収 する溶媒中に溶解し、得られた溶液を凍結させ、次いで、凍結 溶液を約10・トルを越えない蒸気圧を与える温度まで冷却し、 次いで、脱着工程中の顔速の危険を最小限にしながら、凍結試

露して、質量分析装置での分子の分析に先立つて脱着分子をイ オン化させてもよい。いずれの場合でも、脱着工程中の分裂は 避けられるか扱小限に食い止められ、非特定の、あるいは制御 不能な分裂は起こらないようになる。

若し、分子(単または複数)に官能基があり、それが存在すれば、そこで開製が起こる特定の点での開製による、そうした官能基の分析を通じての分子(単または複数)の固定のための協加的手段を提供するため、大きな分子あるいは分子の混合物を分裂させることが望ましいなかまうな分裂に使用されるエネルギーが非特定の分裂を避けるべく、および/または、その中で分子の官能基(複数)が隣接していると言う演察のため分裂の程度をゆっくり変化させるべくは意深く制御することが出来る別の工程でしてもよい。かような後続の別の分裂工程は、当技術に熟達した者に良く知られており、本発明の一部を成すものではない。

連結溶液を形成し、次いでこの溶液の裏面から分子を局部的にのみ脱着させること、即ち、好ましくは、分子の質量にもよるが一時に約1から100層の分子、即ち一時に約300ポングストロームの深さまで脱着させることにより、そうでなければ、分子の内いくらかのものの分裂または反応を招く大量の気化エネルギーに対する、分子の暴露を最小限にしなから、大きな分子の制御された気化を与えることが可能となる。

『大きな分子』なる用語の使用により、それに、バイオモレキュール、即ち少なくとも500原子質量単位 (anu)の分子量を有する生命化学分子、のような分子を意味させる。脱著工程中のかような大きな分子の分裂の危険を最小限にしながら、本発明方法で有利に処理可能なバイオモレキュールあるいは生命

料の裏面から大きな分子をレーザ放射、イオンビーム・ボンバードメントあるいは高速原子ビーム・ボンバードメントのようなエネルギー源を使用して脱着させ、次いで、脱着分子をイオン化エネルギー源に暴露して、イオン化分子の質量分析の準備をするよう、脱着分子をイオン化することによる、1以上の大きな分子の質量分析用は料の概製方法を提供することにある。

本発明のこれらおよびその他の目的は、以下の説明および恐 付図面から明らかとなるであろう。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明方法を概括的に描いたフロー・シート、 第2図は、本発明方法の実施に関して育用な装置を説明する 一部を切り開いた斜視図、また

第3回は、連結溶液を大きな分子の真空室内での脱着を許容するのに充分な低温に維持するのに使用される冷却手段を示す 第2回の一部の分解側断面図である。

#### 発明の詳細な説明

本発明によれば、大きな分子は、仮初に、その後かような大きな分子を脱者させるのに使用するエネルギーを吸収することの出来る低分子量の溶媒中の大きな分子の溶板とし、次いで得られた溶液を凍結させ、次いで、凍結溶液をレーザ、電子ビーム、イオンビームあるいは高速原子ビームのような脱着エネルギー組に暴露して、かような大きな分子を凍結溶液の表質の危険をきせることにより、その大きな分子の不所望な分裂の危険を最小限にしながら、質量分析で分析することが出来る。

若し、この大きな分子を脱着させるのに使用するエネルギー 変が同時に分子をイオン化しないならば、脱着分子を、別の、 例えばレーザピームの光イオン化変のようなエネルギー源に基

化学分子のような大きな分子の型の例には、ペプチドおよび多様類が含まれる。

この大きな分子は、好ましくは、脱著エネルギー複からのエネルギーを強力に吸収する低分子置溶媒、例えばレーザの波長でのレーザ光を強力に吸収する低分子量の溶媒中に溶解させられ、凍結試料の大部分には脱著エネルギーは僅かにのみ浸透して、上で議論したように凍結溶液から、分子の表面の頂上層をるいは頂上のいくらかが、即ち表面の約1—100層に限つて除去されることが容易なようにする。

『低分子質の溶媒』とは、約100 asu より小さい原子量を有する分子より本質的に成る1以上の化合物を含む溶媒を発味する。本発明の実施に使用可能な溶媒の例には、水、アルデード、ケトンおはで有機酸のような1—5の必要の有機溶媒およびかような有機溶媒のハロゲン化な溶解とである。かような溶媒を使用する理由には、容易溶解により分子を進行すること、より軽く、より速く運動する溶媒が子との多くの衝突による大きな分子の内部的で、より大きな溶媒が子との多くの衝突による大きな分子の内部の変量の大きな差による質量干渉の固定が含まれる。

好ましい実施例に従った、脱着源からのエネルギーの溶媒による吸収の度合いに関して、「強力に吸収する」なる用語は、脱着源、とりわけ脱者エネルギー源がレーザ源であるとき、それからのエネルギーを充分に吸収し、約70 - 100 %のエネルギーを連結溶液の表面の約1 - 10 マイクロメータ以内で吸収するような溶媒を意味する。これは、脱着工程において、若し

#### 特表平3-503317(5)

、連結榕後の質量全体が刺激されているとすれば、より容易に 起き得る大きな分子の分裂を阻止しながら、大きな分子の所望 の制御された脱着を与える。それにより、試料の不必要な加熱 が避けられ、そして脱着を分子唇の極く限られた範囲に限定す ることにより、脱着を、より制御され一様なもの、即ち裕質分 子とは無関係なものとすることができる。

溶媒中の大きな分子の濃度は、充分に低くして、熔質分子の 重要な相互作用を避け、刺激ビーム― 溶媒の相互作用が脱着プ ロセス全体を支配することを許容し、このプロセスが信頼でき 一様であるよう、即ち溶質分子の性質に強くは依存しないよう にすべきである。したがつて、溶液の濃度は、10°溶媒分子 につき約1を越えない溶質分子のものとすべきであり、典型的 には、濃度は、10°溶媒分子につき約1を越えない溶質分子 のものとなる。

本発明にしたがつて低分子量の溶媒に溶けた大きな分子の溶 液を作つた後、溶液は、そこから分析すべき大きな分子が脱着 しうる固体物質を与えるために復結される。

分析すべき凍結溶液試料を作るために凍結される溶液の量は、大きい必要はなく、より大きい量も許容しうるが、一滴、例えば扱小約 1 μ 1 の小量で構成されてよい。

続く脱着工程自体のために、溶液の温度を、液体溶液を固相 に変えるのに充分なように低くすることだけは必要である。 し かしながら、大きな分子は脱着の後、脱着が真空室で起こるこ とを指令する高真空の質量分析装置に運ばなければならない。

この点から、凍結溶液を、脱著に先立つて、そこでの蒸気圧 が凍結溶液を脱者工程前に真空室に入れることを許容するよう な充分低い滋度まで冷却することが必要である。好ましくは、 凍結溶液は、そこでの凍結溶液の蒸気圧が、約10°°トルを始 えない温度、さらに好ましくは、約10°°トルを始えない温度 まで冷却すべきである。

この冷却は、凍結溶液を脱著工程が生じる真空室に入れる前 に行なつてよく、効果的である。しかしながら、凍結溶液を真 空室に入れた後、その温度をさらに冷却することも本発明の範 囲内である。

いずれの場合でも、凍結溶液を真空室の所望の低い圧力を維持するのに充分な低い温度に維持するため、ならびに溶媒の優先的な蒸発に由来する試料の頂部における一様でない機度分布を避けるため、真空室内に冷却手段を設けることが必要である。これは、装置の説明で後述するように、その上に凍結溶液が乗り、それを過じて外部の冷却率からの冷媒が循環する真空室内のコールド・プレートを含むものであつてよい。

第2 図および第3 図を参照すると、本発明の実施に使用するのに適した装置が低活的に示されている。この装置のいくつかの局面は、そうしたものの詳報様成に関して、相互参照した上述の、ペッカーらの米国特許第4.733.073 号に図解し記述された装置とほぼ同様である。

第2 図に示すように、真空室 2 内には、試料保持具 1 0 が設けられており、その上に凍結溶液の試料 8 が置かれあるいは乗せられている。真空室 2 内には、さらに慣用の真空ポンプ手段(図示せず)に導くポート 6 を含む室 2 のための排気手段が設けられている。

第3図でより詳細に示すように、試料保持具10は、さらに 試料8を、少なくとも10~8トルを越えない温度、好ましくは 、約10~8トルを越えない所望の低い蒸気圧を難持するのに充

分な冷却温度に維持する手段12を含むものであつてよい。冷却手段12は、それを通じて外部の冷却減22からの冷媒が流入管18および流出管20を経由し循環する1以上の通路16を育する金属バック・プレート14を含むものであつてよい。

股者エネルギー源手段30は、真空室2の外部あるいは内部(図示のように)のいずれに置かれてもよいが、脱者エネルギー源31および指向手段32を含むものである。源31には、電子紋、イオン統あるいはレーザが含まれてよい。キロ電子ボルト・エネルギーの中性原子あるいは分子もまた、脱者エネルギー源31として使用することができる。かようなエネルギー源の構造は、慣用のもので、当技術に熟達した者に、例えば電子ビーム脱鞍、イオン・ビーム・スペッタリングあるいはレーザ・マイクロプローブ技術からよく知られているものである。

脱者エネルギー渡31と結合してエネルギー渡31からのエネルギー・ピームを試料8上に指向する指向手段32は、 荷電粒子ピームに対する静電および/または電磁集束および偏向手段、あるいは試料8の表面上にレーザ光ピームを指向・無束させる銭およびレンズを合むものであつてよい。

直接イオン化、即ち脱着と同時のイオン化、が適しない場合について、真空室2内の脱着分子をイオン化するため、イオン化手段40 は、イオン化手段40 は、イオン化ビームの位置を決定するのに使用する高強度光源42、集束レンズ系44 およびアイリス絞り46 を合むものであつてよい。イオン化ビーム源42は、典型的には、高強度レーザあるいは分析すべき脱着した大きな分子の効果的な光イオン化を充分に達成するために共に結合したレーザと光学材料および部品との組合せによって装御される。

第2図に示す実施例において、真空室2には、そこを通じて放射のイオン化ビームが投射される直径方向で対向している窓52および54が備えられていてよい。この実施例では、イオン化ビーム源42が、真空室2の外側に設けられ、イオン化ビームは窓52を通じて分析すべき試料8の表面に近接したイオン化領域に向けられる。イオン化ビームは、続いて窓54を通じて位置決定アイリス絞り48を過ぎ、イオン化ビーム源42の光強度を監視する役割の検出器50に受け止められる。

脱着時にイオン化しない脱着分子のイオン化は、真空繋外線(VUV) 放射を伴うシングル光量子イオン化を使用して行つてもよく、これは大きな分子に対する柔軟な方法で、非選択的であり、また極めて効果的したがつて高感度にすることができる。非直線的に作られたコーヒレントな光ビーム、例えば、118 ナノメータで約10.5 電子ボルトのエネルギーレベルを有するものは、シングル光量子 VUV 光イオン化源として便利である。シングル光量子ビーム源の強度は、マルチブル・イオン化がムこらないように制御しなければならない。光イオン化ビーム源の強度は、それゆえ好ましくは吸収確率が、約10%を越えな

### 特表平3-503317(6)

いように制御される。

マルチブル光量子は、若し特定の分析すべき大きな分子のイオン化ポテンシャルが、より短い波長即ち約 130ナノメータより短い波長を使用しない限りシングル光量子エネルギーより高い時にも脱着分子をイオン化するのに使用してもよい。しかしながら、マルチブル光量子イオン化を使用した時、禁度の制御はとりわけて重要となる、と言うのは、分子の制御不能な崩壊が生じる暴走(runaway) 吸収条件を経験することがあるからである。一般的に、約10 W/cdを越えないレーザ・パワー密度が通当である。

しかしながら、シングルあるいはマルチブル光量子イオン化のいずれを使うかで、分折すべき大きな分子のイオン化に必要とされるエネルギーを越えるある追加的なエネルギーの吸収が、大きな分子に付着しているすべての溶媒分子を振り払うのに使われてよい振動エネルギーに変換されることがあり、また追加的に吸収されたエネルギーが、単に電子融去における動力学的エネルギーとして消散すると言うことに注意しなければならない。

真空室 2 はさらに、第 2 図で一般的に 6 0 で示す本発明による 康結溶液から脱者し、イオン化した大きな分子の質量分析のための質量分析手段を合んで (あるいは、それと結合して) いてもよい。この質量分析手段 6 0 の代替的な型は、ここに相互参照した上述の、ベッカーらの米国特許第 4.733.073 号で、より課題に臨論されている。

かように、本発明は、凍結溶液からの脱着が、脱着工程中、 大きな分子の分裂あるいはクラスタリングを最小限に止める手 法での質量分析のための大きな分子の処理方法を提供する。 イ オン化は、脱着される分子にもよるが、脱着工程と一緒に行つてもよく、また別のイオン化工程で行つてもよい。成る特徴的な脱壊が、質量分析のために望ましいときがあるので、本発明のシステムは、制御された手法での意図的崩壊工程(例えば的レーザ放射あるいは衝突活性化)の追加を容易にするのに役立つようにされている。このようにして、脱着、イオン化および、必要なら崩壊の3プロセスは、最大の効果のために最大限に断結合(decouple)されていてよい。


、 質量分析により分析すべき大きな分子型の化合物の溶液を、 大きな分子を低分子量の溶媒中に溶解して形成する。


この移痕を、砲結させ、それを落気圧が10°°トルより小さ い温度まで冷却する。

真空室中で、脱岩エネルギー源を使用し、その凍結溶液から 分子の身原原本障害ュルス

その以着した分子を、脱着した分子を崩壊させないレベルの エネルギーで光イオン化する。

脱落し且つイオン化した分子を、質量分析装置中で、分析す

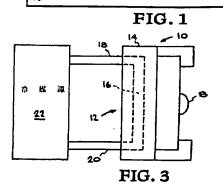

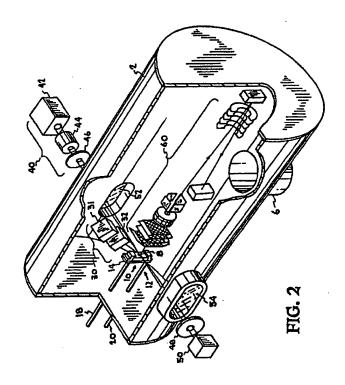

	CSI 169. 678	查 報 告	rus 90/00229
f. CLA		nedamen symmen easy, margain say !	
	, H 01 J 49/04, G 01 N 30/		
-			
		Paration Concred *	
Cheekle	ton Europe L	Charifestan Symans	
IPC <sup>S</sup>	H 01 J, G 01 M, H 0	1 L	
1	Occamentary Sources of the	or then there on Specerostellen Mrs ore included in the finite Secretor o	
Catabook ,	Chiese at Corument, " and industries, where of	and the spinner particular of	( Appropri to Claim No. 12
	1		1
^	WO, A, B5/02907 (SRI IN 4 July 1985 see figure 1; page page 9, line 35 - p page 13, lines 17-3	6, lines 8-20;	1-3,9-20
	18-24 (cited in the applicati	onj	
^	EP, A, 0175467 (MICOLET 26 March 1986 wee figure 1; abstr lines 15-26; page 1 page 11, lines 8-12	act: page 9, 0, lines 21-27;	1-3,10,15,20
^	US, A, 4663944 (M.T. BE 12 May 1987 see figure 3; abstr		1,15,20
1 ;		./.	ł
"A" der code "I" della "L" der cout "P" der con	(h. 16 lifted to possible) pine publication dots to dispositive first point appear reas you (per specific) and other interests to dissease the publishes or it density are the proof to the indestinational filling date but State the proofs to the indestinational filling date but State the proofs date Statebook	"A" Description (Inches) to the last of the course of the	LE: The sidemed mysement manner the companied to the photons step even the total photons step even the total photons step to make amon shall distri- ducing the companies of the companies of the total step even the companies to the companies of the companies to the companies of the companies to the companies of the companies of the total step even the companies of the companies of the total step even the companies of the companies of the total step even the companies of the companies of the companies of the total step even the companies of the c
	FIEATION		
	Ather Company of the International Source May 1990	2 6. 06. 90	arek Report
de termette ex	EIROPEAN PATEUT OFFICE	NO	[

US 9000229 SA 34354

Parest document cited on search repart	Polyfication date	Patent (nmiry member(x)	Publication data
WO-A- 8502907	04-07-85	AU-B- 570531 AU-A- 3744785 CA-A- 1220879 DE-T- 3490395 EP-A,8 0167551 GB-A,8 2160014 JP-T- 61500866 NL-T- 8420306 SE-B- 452676 SE-A- 8503901 US-A- 4773073	17-03-88 12-07-85 21-04-87 28-11-85 15-01-85 01-12-85 01-05-86 01-11-85 07-12-87 21-08-85 22-03-88
EP-A- 0175467	26-03-86	US-A- 4594506 JP-A- 61071353	10-05-85 12-04-85
US-A- 4567944	12-05-87	None	

| DESCRIPTION | POT | PO

Evictory,	Casion of Despiners wit received among components of the terribile possibles	Account to Close by
	Science, vol. 218, 15 October 1982. AAAS, K.I. Busch et al.: "Hass spectrometry of large, fragile, and involutile molecules" see pages 247-254 (cited in the application)	
	Mesures Régulation Automatisma, vol. 48, no. 2, 21 February 1983, [Paris, FR], No. Misiar: "Le récent couplage CPI/SM doit reculer les limites de l'anelyse" sue pages 51-61	
•	***************************************	!
	·	
•		:
		ŀ
•		!
	•	!
;		
	•	
•		
		İ
	•	ł
		ļ
		:

<del>- 7 -</del>